


QUICK START GUIDE

Review full instruction book prior to first use.

1 FIRST USE

Fill reservoir with warm water and replace it firmly on the base.

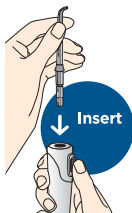

Insert tip until it clicks into place.

Turn pressure to high, point tip into sink, turn unit on until water flows from the tip.



2 START WATER FLOSSING


**TO AVOID MESS:
PLACE THE TIP
IN YOUR MOUTH
BEFORE TURNING
UNIT ON**

Turn power on. Start on low pressure and increase to your liking.



3 LEAN OVER SINK

Close lips enough to prevent splashing, while still allowing water to flow from mouth into the sink.

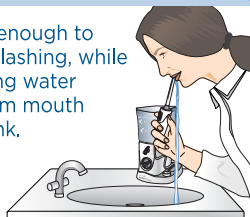

4 TECHNIQUE

Aim water at a 90° angle to your gumline. Follow the gumline and pause briefly between teeth.



5 HOW TO VIDEO

Visit
waterpik.com/VID310


Register your product and receive over \$50 in savings.
waterpik.com/registration

GUÍA RÁPIDA PARA COMENZAR

Revise el manual de instrucciones por completo antes del primer uso.

1 PRIMER USO

Llene el depósito con agua tibia y vuelva a colocarlo firmemente en la base.

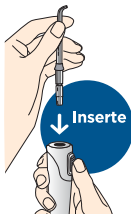

Inserte el cabezal hasta que encaje en su lugar.

Coloque la presión en alta, apunte el cabezal hacia el interior del lavabo, encienda la unidad hasta que salga agua del cabezal.



2 INICIE EL IRRIGADOR BUCAL


**EVITE DERRAMES:
COLOQUE EL CABEZAL
EN LA BOCA ANTES DE
ENCENDER LA UNIDAD**

Encienda el equipo. Comience con presión baja e increméntela según su agrado.



3 INCLÍNESE SOBRE EL LAVABO

Cierre los labios lo suficiente para evitar salpicar mientras el agua continúa fluyendo de la boca hacia el lavabo.

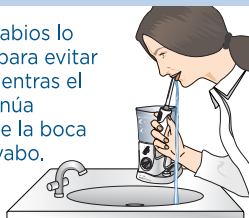

4 TÉCNICA

Dirija el agua hacia la encía en un ángulo de 90°. Siga la línea de las encías y haga pausas breves entre los dientes.



5 CÓMO VER VIDEOS

Visite waterpik.com/VID310

Registre su producto y reciba más de USD 50 en descuentos. waterpik.com/registration